

MIẾNG DÁN SILICONE CINOSCAR: LOẠI DÀY TRONG SUỐT VÀ LOẠI MỎNG CÓ CHỐNG TIA UV

Miếng dán silicone CINOSCAR là một công nghệ đã được chứng minh hiệu quả trong việc điều trị sẹo lồi và sẹo phì đại, đồng thời ngăn ngừa sự phát triển bất thường của sẹo sau phẫu thuật, chấn thương, bỏng...

Miếng dán silicone CINOSCAR giúp sẹo phẳng hơn, mịn hơn và mỏng hơn, đồng thời giảm thiểu các vấn đề như đỏ dai dẳng, kéo giãn sẹo, ngứa, hạn chế vận động khớp, khó chịu và các vấn đề về thẩm mỹ.

■ Miếng dán silicone CINOSCAR dạng dày

Trong suốt, có thể giặt được, tự dính và có thể tái sử dụng trong thời gian dài (1.5-2 tháng).

Thành phần: 100% silicone y tế và lớp phim polyurethane.

■ Miếng dán silicone CINOSCAR dạng mỏng

Có khả năng chống tia UV, tự dính và có thể giặt được. Độ bám dính cao, đảm bảo miếng dán sẽ bám chặt vào mọi vùng trên cơ thể. Thích hợp sử dụng dưới lớp quần áo. Có thể tái sử dụng trong thời gian dài (3-4 tuần).

Thành phần: 100% silicone y tế và lớp textile (polyamide, elastane).



LỢI ÍCH VÀ ỨNG DỤNG CỦA MIẾNG DÁN SILICONE CINOSCAR

- Hiệu quả trên cả sẹo mới và sẹo cũ.
- Giữ cố định chắc chắn cho dù chuyển động cơ thể, ngay cả khi dán lên các nếp gấp da.
- Miếng dán mỏng silicone CINOSCAR giúp ngăn chặn ít nhất 93% bức xạ UV.
- 100% silicone y tế.
- Linh hoạt và lý tưởng cho da nhạy cảm. Thích hợp cho sẹo sau sinh mổ.
- Cảm giác mềm mại và thoải mái, nhờ chất liệu và lớp trên cùng độc đáo.
- Tái sử dụng lâu dài, an toàn và tiện dùng.
- Tuân thủ theo Hướng dẫn Quản lý sẹo Quốc tế.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MIẾNG DÁN SILICONE CINOSCAR

- Trước khi sử dụng miếng dán silicone CINOSCAR, cần làm sạch và lau khô vùng da trên và xung quanh sẹo.
- Loại bỏ lông xung quanh vị trí sẹo sẽ giúp cải thiện độ dính và độ bền của miếng dán.
- Miếng dán silicone CINOSCAR có thể được cắt theo kích thước phù hợp với vết sẹo, nhưng cần đảm bảo miếng dán che phủ vết sẹo ra đến khoảng 2cm xung quanh vùng da bình thường.
- Bóc lớp màng bảo vệ ở mặt sau của miếng dán silicone CINOSCAR và dán lên vết sẹo.
- Nếu cần, có thể cố định miếng dán silicone CINOSCAR bằng băng dính.
- Sau khi loại bỏ miếng dán silicone CINOSCAR, có thể thoa kem dưỡng ẩm cho da.
- Để đạt kết quả tối ưu, tốt nhất nên bắt đầu sử dụng miếng dán silicone CINOSCAR ngay sau khi vết thương đóng miệng hoàn toàn (chỉ khâu và vảy đã được loại bỏ hoàn toàn).
- Để đạt kết quả tốt nhất, nên sử dụng miếng dán silicone tối thiểu 12 giờ đến tối đa 23 giờ mỗi ngày.
- Nên tăng dần thời gian sử dụng miếng dán silicone CINOSCAR lên đến tối đa 23 giờ mỗi ngày để giúp da làm quen với liệu pháp miếng dán silicone.



Nhập khẩu và phân phối độc quyền:

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI THUẬN PHÁT

Head office: 2/7/5 Đường số 30, P. Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh

Branch office: SOHUDE Tower, 331 Nguyễn Trọng Tuyển, P. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 2249 3388


Hotline: 0938 007 433

Website: www.dtpmedical.vn

(Tài liệu lưu hành nội bộ)



Liệu pháp silicone điều trị sẹo chuyên nghiệp

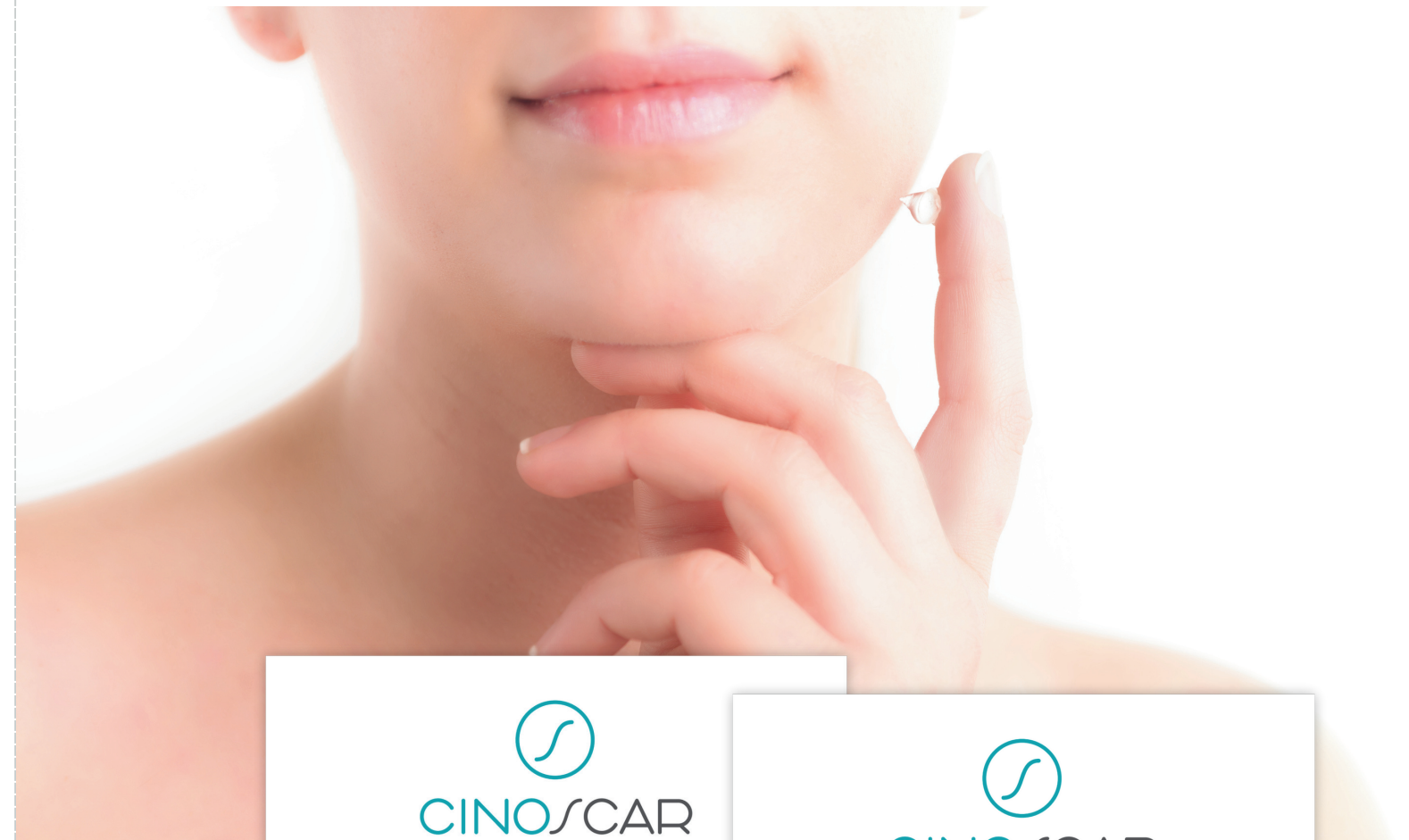

LIỆU PHÁP SILICONE LÀ TIÊU CHUẨN VÀNG TRONG QUẢN LÝ SẸO ^{(2),(4)}

Liệu pháp trị sẹo bằng silicone đã được các bác sĩ và chuyên gia về sẹo trên thế giới chấp nhận rộng rãi nhất trong hơn 20 năm qua. Miếng dán silicone và gel silicone CINOSCAR là một liệu pháp trị sẹo bằng silicone y tế.

Silicone được biết đến với tác dụng rất tốt trong việc cân bằng độ ẩm cho da. Nó được xem như một giải pháp trị sẹo rất thân thiện với làn da. Ngoài ra, nó ngăn không cho vi khuẩn xâm nhập.

Theo Hướng dẫn Quản lý Sẹo Quốc tế (*The International Scar Management Guidelines*), liệu pháp điều trị sẹo bằng silicone được xem là:

- Liệu pháp đầu tay cho phòng ngừa và điều trị sẹo
- Một lựa chọn điều trị không xâm lấn đã được chứng minh khoa học
- Khuyến nghị dựa trên bằng chứng
- An toàn và dễ sử dụng

Hiệu quả của CINOSCAR đã được chứng minh trong một nghiên cứu đa trung tâm với 224 bệnh nhân ⁽¹⁾. Gel silicone và miếng dán CINOSCAR làm giảm đáng kể:

- Mức độ nhìn thấy sẹo và các biến chứng
- Các triệu chứng của sẹo như ngứa, đau và các vấn đề về thẩm mỹ

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CINOSCAR

Mô sẹo mất độ ẩm nhiều hơn so với vùng da khỏe mạnh xung quanh. Cơ thể phản ứng với điều này bằng cách gửi đi các yếu tố chữa lành kích thích đến mô sẹo, cho phép tạo ra nhiều mô liên kết hơn. Điều này có thể gây ra sẹo phì đại hoặc sẹo lồi.


Việc che phủ vết sẹo bằng gel silicone hoặc miếng dán silicone CINOSCAR giúp giảm mất nước tương đương với vùng da xung quanh. Nhờ đó, cơ thể ngừng tạo mô sẹo. Kết quả là:

- Sẹo trở nên phẳng hơn và giảm đỏ nhiều hơn
- Da trở nên mềm mại hơn (da ít căng hơn)
- Tối thiểu hình thành sẹo bất thường

LIỆU PHÁP SILICONE CINOSCAR

Bảo vệ da và giảm sự mất nước

Phục hồi cân bằng độ ẩm

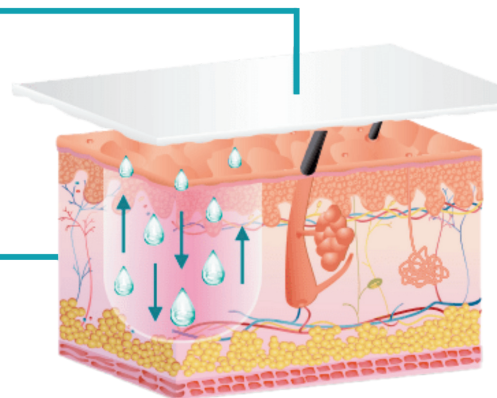

CÁC NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG

1. Niessen, F. et al. Topical Silicone Sheet Application in the Treatment of Hypertrophic Scars and Keloids. *Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology* (2016) 9(10): 28-35.
2. Monstrey, S. et al. Updated scar management practical guidelines: non-invasive and invasive measures. *Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery* (2014) 67: 1017-1025.
3. Mustoe, T.A. et al. International Recommendations on Scar Management. *Journal of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery* (2002) 110(2): 560-571.
4. Meaume, S. et al. Management of scars: updated practical guideline and use of silicones. *European Journal of Dermatology* (2014) 24(4): 435-43.
5. Gauglitz, G. et al. Hypertrophic Scarring and Keloids: Pathomechanisms and Current and Emerging Treatment Strategies. *Molecular Medicine* (2011) Jan-Feb; 17(1-2)113-125.

GEL SILICONE CINOSCAR LÀ GÌ?



Sản phẩm là một loại gel trong suốt, tự khô được làm từ silicone y tế. Gel silicone CINOSCAR tạo thành một lớp phim mỏng trên bề mặt da, không thấm vào da. Vì vậy, gel luôn tiếp xúc với da.

Gel silicone CINOSCAR được sử dụng trong liệu pháp quản lý sẹo chuyên nghiệp để ngăn ngừa và điều trị sẹo phì đại/sẹo lồi. Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy việc sử dụng gel silicone CINOSCAR làm giảm sự hình thành sẹo bất thường.

ĐIỀU TRỊ SẸO VỚI GEL SILICONE CINOSCAR

Gel silicone CINOSCAR có thể được sử dụng cho cả sẹo cũ và sẹo mới để:

- Điều trị và ngăn ngừa sẹo bất thường (sẹo phì đại và sẹo lồi).
- Điều trị sẹo bỏng, sẹo mổ để.
- Điều trị sẹo phẫu thuật thẩm mỹ (nâng mũi, cắt mí mắt, phẫu thuật căng da mặt, nâng và thu nhỏ ngực, tạo hình thành bụng...).
- Điều trị các vấn đề chức năng dai dẳng do sẹo gây ra (đỏ dai dẳng, kéo căng, ngứa, hạn chế vận động khớp, tính thẩm mỹ).

ĐẶC ĐIỂM VÀ LỢI ÍCH CỦA GEL SILICONE CINOSCAR



- 100% trong suốt.
- Khô rất nhanh, không nhờn dính và có thể được phủ lên bằng kem chống nắng hoặc mỹ phẩm.
- Liệu pháp trị sẹo kín đáo.
- Lý tưởng để điều trị sẹo vùng mặt.
- Hiệu quả cho cả sẹo cũ và sẹo mới.
- Được thiết kế cải tiến dưới dạng airless dispenser (dạng nút ấn) rất tiện lợi và dễ dàng sử dụng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GEL SILICONE CINOSCAR

- Để đạt kết quả tối ưu, tốt nhất nên bắt đầu điều trị bằng gel silicone CINOSCAR ngay sau khi vết thương đóng miệng hoàn toàn (sau khi cắt chỉ và đóng vảy).
- Làm sạch và lau khô da trước khi sử dụng gel silicone CINOSCAR.
- Chỉ cần một lượng nhỏ gel silicone cho mỗi lần điều trị là đủ. Để đạt hiệu quả điều trị tối ưu, hãy thoa một lượng nhỏ gel silicone lên vết sẹo 2 lần/ngày theo chuyển động nhẹ nhàng.
- Thoa lại gel silicone CINOSCAR sau khi hoạt động mạnh (thể thao) và tiếp xúc với nước (tắm, bơi).
- Sau khi gel silicone CINOSCAR khô, có thể phủ lên bằng kem chống nắng hoặc mỹ phẩm.

